



Benutzeranleitung Online-Laborauftrag ohne Datenübertragung

Das ist eine Benutzeranleitung für Kunden, die ihre Laboraufträge online im SwissAnalysis Portal erfassen. Patientendaten werden manuell eingegeben. Laborbefunde werden im SwissAnalysis Portal gelesen.

Inhalt

1	Laborauftrag erstellen und versenden	2
2	Laborauftrag vorbereiten oder löschen.....	7
3	Laboraufträge bearbeiten	9
4	Befunde einsehen	13
5	Passwort zurücksetzen	15



1 Laborauftrag erstellen und versenden

Öffnen Sie das SwissAnalysis Portal in Ihrem Internetbrowser:


<https://oe.swissanalysis.ch/de/>





Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein:

1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
2. Geben Sie das von Ihnen erstellte Passwort ein
3. Wählen Sie die Schaltfläche «Login» aus

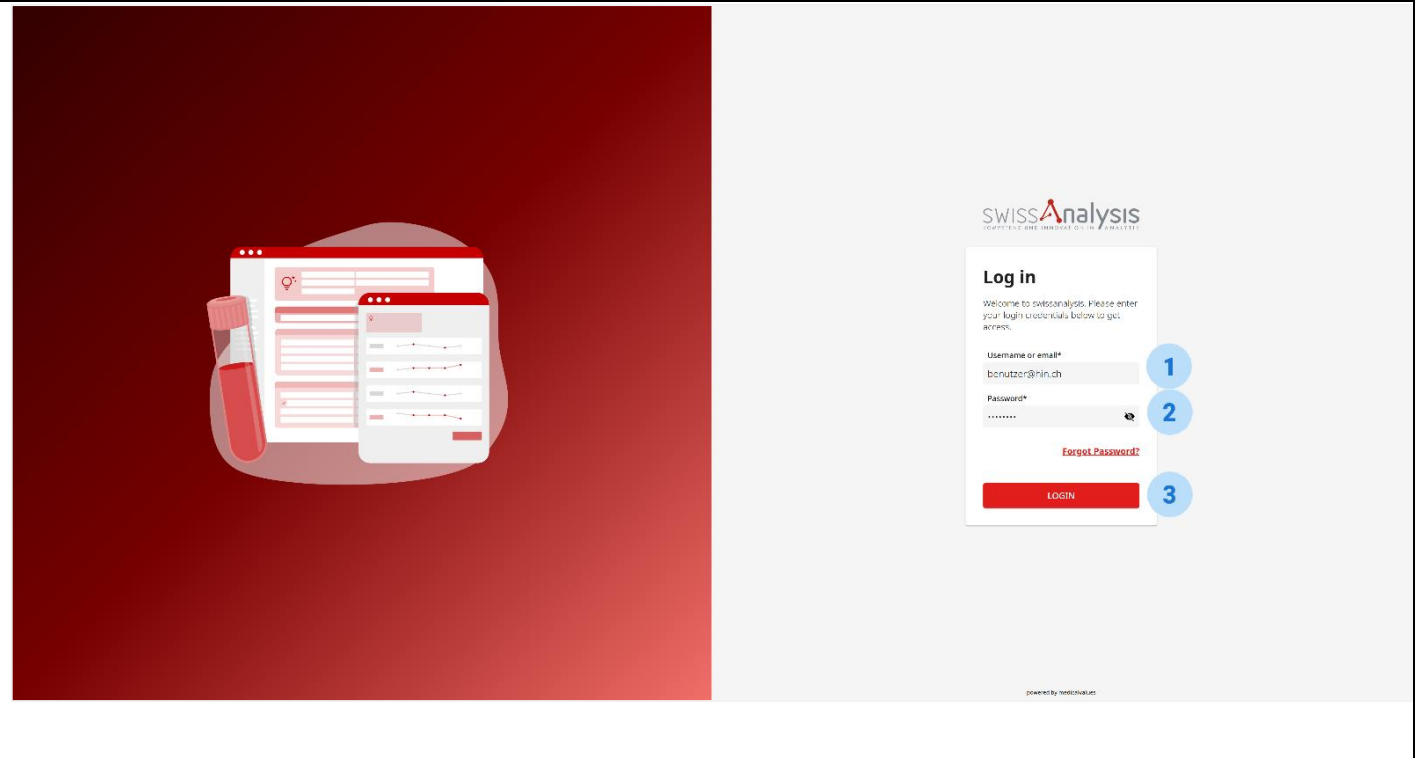



1. Wählen Sie «Neuer Auftrag» aus
2. Wählen Sie «Neue Patient:in anlegen» aus, wenn der/die Patient:in noch nicht vorhanden ist
3. Geben Sie Vor- und Nachnamen ein
4. Wählen Sie «Erstellen» aus

The screenshot displays the SWISSAnalysis Order Intelligence interface. A modal window titled 'Neuer Auftrag' is open, allowing for the creation of a new order. The 'Ersteller' (Creator) is set to 'TEST-Einsender' and the 'Empfänger' (Receiver) is 'Dr. Spanischer Dorfchef Dorfpraxis Spanier'. The 'Neue Patient:in anlegen' checkbox is checked, indicating that a new patient is being created. The 'Vorname' (First Name) field is filled with 'Max' and the 'Nachname' (Last Name) field is filled with 'Müller'. The 'Erstellen' (Create) button is highlighted with a red box, and the 'ABBRECHEN' (Cancel) button is visible at the bottom left of the dialog. The background shows a list of 'Ungelesene Befunde' (Unread Findings) and a navigation menu on the left.



1. Demographischen Daten des/der Patient:in eingeben
2. «Speichern» auswählen

The screenshot shows the 'Patientendaten' form in the SWISSAnalysis Order Intelligence system. The form is titled 'Patientendaten' and is part of an order for 'Max Müller' (Auftrag 42014531). The form contains the following fields:

- Patient:in:** Max Müller
- Geschlecht:** männlich
- Geburtsdatum:** 01.01.2000
- Adresse:** Straße, Postfach, 9000 St. Gallen, Schweiz
- E-Mail-Adresse:** (empty)
- AHV-Nr.:** (empty)
- Abrechnung:** Selbstzahler:in
- Rechnungsempfänger:in:** Max Müller

The 'SPEICHERN' button is highlighted in red, and a blue box highlights the 'Adresse' field. A blue circle with the number '1' is next to the 'Geschlecht' dropdown, and a blue circle with the number '2' is next to the 'SPEICHERN' button.



1. Gewünschtes Profil auswählen
 2. Gewünschte Analysen oder Analyseblock auswählen oder suchen
 3. Falls gewünscht, können patientenbezogene Daten bearbeitet und ergänzt werden
 4. Fall- und Auftragsbezogene Daten können bearbeitet und ergänzt werden
 5. Weitere Auftragsinformationen oder Patientendaten (wie z.B. Behandlungsart, Gewicht oder Körpergröße) können ergänzt werden. Zusätzlich können unter „Hinweise an Labor“ relevante Informationen an das Labor verfasst werden
 6. Ausgewählte Analysen, Materialien und Preise überprüfen
- „Auftrag abschliessen“ auswählen, um den Auftrag an das Labor zu übermitteln


The screenshot shows the SWISS Analysis software interface. On the left, there is a navigation menu with categories like 'Verzeichnis', 'Favoriten', 'Allergie', 'Auto-Antikörper/Autoimmunität', 'Hormone', 'Infektionsserologie', 'Klinische Chemie', 'Knochenstoffwechsel', 'Medikamente', 'Mikroanalytik', 'Oxidativer Stress/Nitros...', 'Profil', 'Proteine', 'Punktestauf Voranmeldu...', 'Semen-Knochen-Bänder', 'Spurenelemente & Miner...', 'Stresshormone & Neurok...', 'Stoffanalysen', 'Tumormarker', 'Urin', 'Vitamine', and 'Zytodiagnostik'. The main area displays a list of tests under 'Favoriten' and 'Allergie & Unverträglichkeiten'. The 'Allergie & Unverträglichkeiten' section is expanded, showing various tests like 'Zöliakie (TTG-IgA, GAF-IgG)*', 'Gluten IGG*', 'Immunoglobulin A*', 'Transglutaminase IGA*', 'ALEX2 Allergy Explorer', 'Diamino-Oxidase', 'Foodprint 200', 'Fructosemalabsorption*', 'Glucose Aemgastest (STBOP)', 'Hitzemetabolite im Urin*', 'Auto-Antikörper/Autoimmunität', 'ANA HEp2-Zellen', 'ANA-Uber*', 'Trevalin AK*', 'Cholesterin', 'HDL-Cholesterin', 'Natrium', 'Diverse Analysen', 'Coenzym Q10', and 'Drogen'. On the right, there is a 'Patientendaten' section with fields for 'Abnahmedatum & Zeit', 'Auftragsdatum', 'Behandlungsart', 'Krankheit', 'Abrechnung', 'Kassenpatientin', 'Befund / Medikation', 'Diagnosen', 'WEITERE PATIENTENDATEN', 'Gewicht', 'Größe', 'Schwangerschaft', 'Erster Tag des letzten Zyklus', 'Kontrolluntersuchung', 'Sammelmenge (ml)', 'Sammelzeit (h)', 'Hinweis an Labor', 'Ausgewählte Tests', 'ANA HEp2-Zellen', 'Material', 'SST II Advance (Serum), Serum', and 'Kosten: 0,00 Fr.'. At the bottom right, there are buttons for 'LÖSCHEN', 'ALS VORBEREITET MARKIEREN', and 'AUFTRAG ABSCHLIESSEN'.



2 Laborauftrag vorbereiten oder löschen

Öffnen Sie das SwissAnalysis Portal in Ihrem Internetbrowser:

<https://oe.swissanalysis.ch/de/>

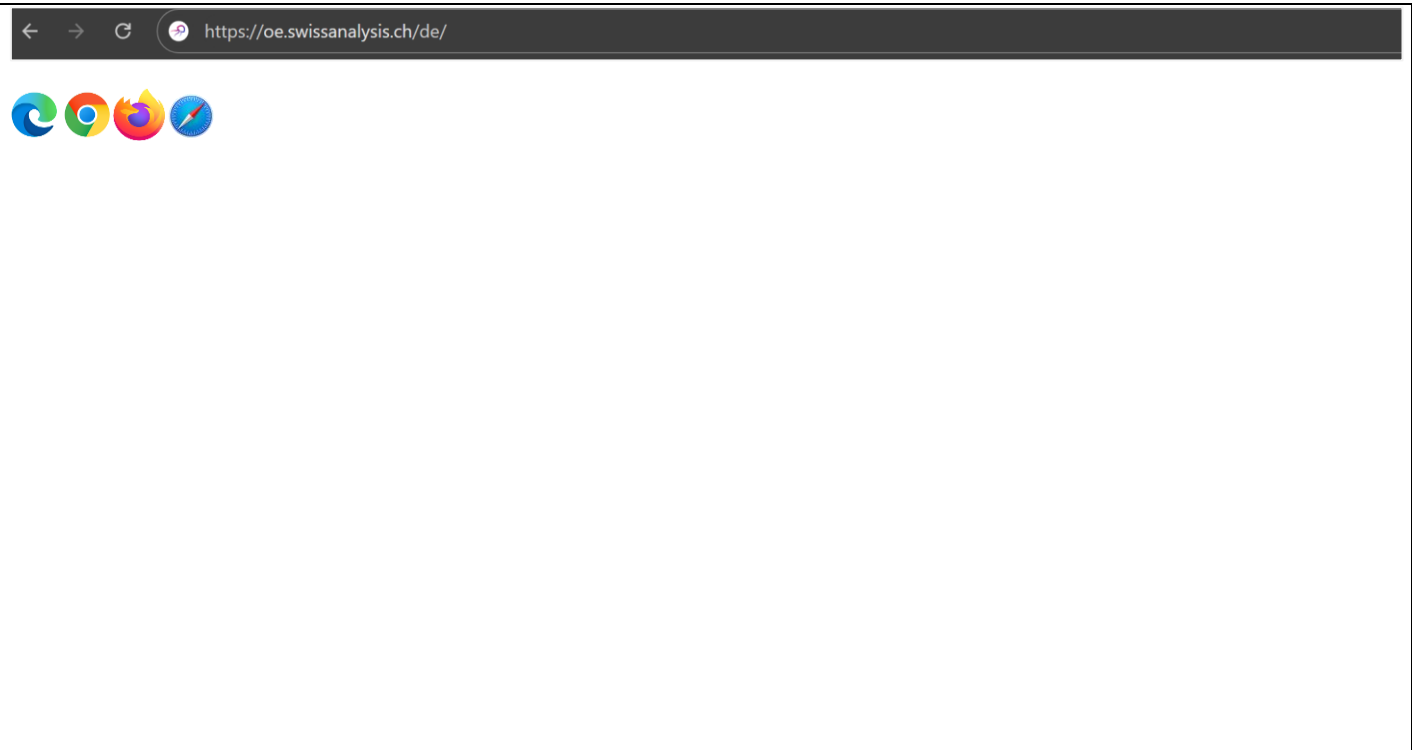



1. Gewünschte Analysen oder Analyseblock auswählen oder suchen
 2. Schaltfläche «Als vorbereitet markieren» auswählen → Auftrag wechselt den Status von «Entwurf» zu «Vorbereitet»
- i** Status **«Entwurf»**: Der Auftrag ist noch nicht vollständig und wurde als Entwurf gespeichert
- i** Status **«Vorbereitet»**: Der Auftrag ist vollständig, wurde jedoch noch nicht an das Labor übermittelt/abgeschickt
3. Der Status wird oben rechts im Auftrag angezeigt. Auf der linken Seite werden Aufträge angezeigt, die sich im Status «Entwurf» befinden.
 4. Einen Auftrag, der sich im Status «Entwurf» oder «Vorbereitet» befindet, löschen.

The screenshot shows the SWISS Analysis software interface. At the top, there's a search bar (1) and a status indicator 'Entwurf' (3). Below the search bar, there's a list of tests categorized into 'Allergie & Unverträglichkeiten', 'Auto-Antikörper/ Autoimmunität', 'Chemie', 'Diverse Analysen', and 'Drogen'. On the right side, there's a patient record section with fields for 'Auftrag', 'Abnehmdatum & Zeit', 'Behandlungsart', 'Krankheit', 'Diagnosen', and 'Ausgewählte Tests'. At the bottom right, there are buttons for 'LÖSCHEN' (4), 'ALS VORBEREITET MARKIEREN' (2), and 'AUFTRAG ABSCHLIESSEN'.



3 Laboraufträge bearbeiten

Öffnen Sie das SwissAnalysis Portal in Ihrem Internetbrowser:

<https://oe.swissanalysis.ch/de/>





1. Schaltfläche «Aufträge» auswählen
2. Den zu bearbeitenden Auftrag auswählen

SWISSAnalysis Order Intelligence

Aufträge NEUER AUFTRAG Geburtsdatum MASSENAKTION -

<input type="checkbox"/>	Status	Patientin	Geburtsstag	Auftragsnummer	Ärztin	Einsender	Abnahmedatum	Tests	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Offene Änderungen	Tina Muster (weiblich, 25 Jr.)	10.10.00	42009804	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	05.05.26, 12:00	ANA	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>	Entwurf	test test (männlich, 65 Jc)	27.11.60	42013376	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	18.04.26, 12:55	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>	Vorbereitet	test test (männlich, 65 Jc)	27.11.60	42013245	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	14.04.26, 14:58	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>	Gesendet	test test (männlich, 65 Jc)	27.11.60	42013244	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	14.04.26, 14:54	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>	In Bearbeitung	test test (männlich, 65 Jc)	27.11.60	42012724	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	31.03.26, 11:44	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>	Abgeschlossen	test test (männlich, 65 Jc)	27.11.60	88885966		Dr. Spanischer Dorfchef...	23.03.26, 09:26		
<input type="checkbox"/>	Storniert	Test Tester (weiblich, 26 Jc)	01.01.00	42011471	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	03.03.26, 13:19	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>	Fehlerhaft	Tester Test (männlich, 75 Jc)	19.09.50	42011457	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	03.03.26, 11:00	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>		Tester Test (männlich, 75 Jc)	19.09.50	42011454	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	03.03.26, 10:52	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>		Tina Muster (weiblich, 25 Jr.)	10.10.00	42009818	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	03.03.26, 10:49	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>		test test (weiblich, 65 Jc)	27.11.60	42011323	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	26.02.26, 15:03	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>		test test (männlich, 65 Jc)	27.11.60	42011305	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	26.02.26, 13:08	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>		test test (männlich, 65 Jc)	27.11.60	42011301	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	26.02.26, 12:14	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>		test test (männlich, 65 Jc)	27.11.60	42011298	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	26.02.26, 10:55	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>		Test Test (männlich, 65 Jc)	27.11.60	42011250	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	25.02.26, 10:56	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>		Test Tester (weiblich, 26 Jc)	01.01.00	42011227	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	24.02.26, 10:00	VITB12	ERGEBNISSE
<input type="checkbox"/>		Test TestOP (männlich, 65 Jc)	27.11.60	42011171	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	23.02.26, 10:00	SWANATEST	KOPIEREN
<input type="checkbox"/>		Test 27 Test 30 (männlich, 65 Jc)	27.11.60	42010773	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	10.02.26, 10:19	FETTSRE,TRIG,HDL,LDL	ERGEBNISSE
<input type="checkbox"/>		Tina Muster (weiblich, 25 Jr.)	10.10.00	42010234	TEST-Einsender	Dr. Spanischer Dorfchef...	30.01.26, 12:57	TSH,BSAK	KOPIEREN

1 - 42 von 42 |< >|



«Bearbeiten» auswählen

The screenshot displays the SWISSAnalysis Order Intelligence interface. The main content area shows a lab order for 'SST II Advance (Serum, Serum)' with a status of 'Das Labor wartet auf den Eingang der Probe(n)'. A red button labeled 'ETIKETTEN BEARBEITEN' is visible. A timeline on the left shows the order's history: 'Bestellte Tests Testanalyse' (14.04.2026 14:53), 'Der Auftrag wurde erstellt von Oswald Petersen' (14.04.2026 14:53), 'Der Auftrag wurde vorbereitet.' (14.04.2026 14:54), and 'Das Labor hat die Auftragsinformationen erhalten.' (14.04.2026 14:54). The right sidebar contains patient data, order details (Auftrag), and a 'Bestellte Tests' section showing 'Testanalyse' for 1,05 Fr. At the bottom, a row of buttons includes 'AUFTRAG STORNIEREN', 'KOPIEREN', 'BEARBEITEN' (highlighted with a blue border), and 'DRUCKEN'.



1. Gewünschte Analysen hinzufügen

i Es können nur Analysen hinzugefügt werden, die mit dem bereits versendeten Probenmaterial verarbeitet werden können

i Bearbeitung kann nur so lange gemacht werden, bis die Proben im Labor ankommen. Danach muss eine Nachforderung ausgelöst werden

2. «Bearbeitung abschliessen auswählen

The screenshot shows the SWISSAnalysis Order Intelligence interface. The main content area displays a list of tests under the heading 'Favoriten' and 'Allergie und Unverträglichkeit'. A red vertical bar highlights the 'ANA HEP2-Zellen' test, which is selected. A blue circle with the number '1' is placed over the test name. At the bottom right of the interface, a red button labeled 'BEARBEITUNG ABSCHLIESSEN' is highlighted with a blue circle and the number '2'. The interface also shows a sidebar with a navigation menu, a search bar, and a patient information panel on the right.




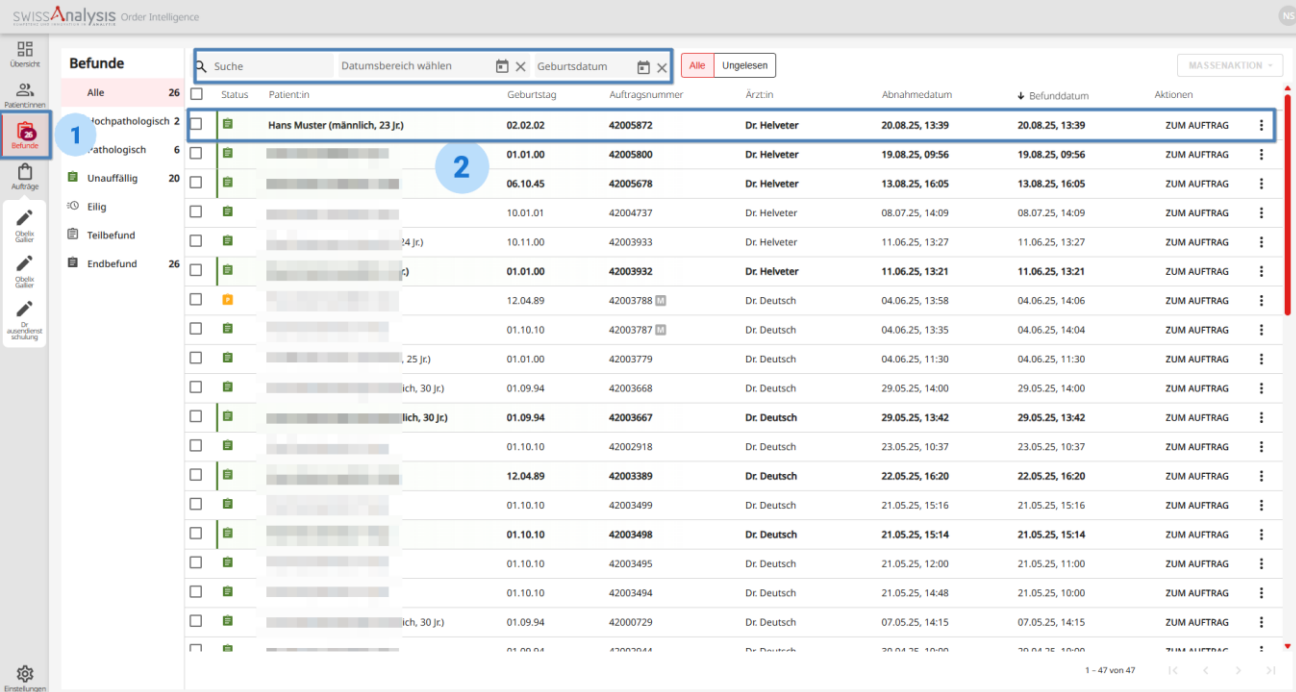
4 Befunde einsehen

Grundsätzlich können Laborbefunde in der Praxissoftware begutachtet werden. Sie sind aber auch im SwissAnalysis Portal verfügbar.

<https://oe.swissanalysis.ch/>

1. Portal aufrufen und links «Befunde» auswählen
2. Den gewünschten Befund auswählen

 *Oben gibt es Such- und Filter-Felder nach Nachname, Datum des Auftrags oder Geburtsdatum des Patienten. Das hilft den gewünschten Laborbefund schneller zu finden.*



Status	Patient:in	Geburtsdatum	Auftragsnummer	Ärzt:in	Abnahmedatum	Befunddatum	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Hans Muster (männlich, 23 Jc)	02.02.02	42005872	Dr. Helveter	20.08.25, 13:39	20.08.25, 13:39	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	01.01.00	42005800	Dr. Helveter	19.08.25, 09:56	19.08.25, 09:56	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	06.10.45	42005678	Dr. Helveter	13.08.25, 16:05	13.08.25, 16:05	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	10.01.01	42004737	Dr. Helveter	08.07.25, 14:09	08.07.25, 14:09	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted] (14 Jc)	10.11.00	42003933	Dr. Helveter	11.06.25, 13:27	11.06.25, 13:27	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted] (Jc)	01.01.00	42003932	Dr. Helveter	11.06.25, 13:21	11.06.25, 13:21	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	12.04.89	42003788	Dr. Deutsch	04.06.25, 13:58	04.06.25, 14:06	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	01.10.10	42003787	Dr. Deutsch	04.06.25, 13:35	04.06.25, 14:04	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted] (25 Jc)	01.01.00	42003779	Dr. Deutsch	04.06.25, 11:30	04.06.25, 11:30	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted] (ch, 30 Jc)	01.09.94	42003668	Dr. Deutsch	29.05.25, 14:00	29.05.25, 14:00	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted] (lich, 30 Jc)	01.09.94	42003667	Dr. Deutsch	29.05.25, 13:42	29.05.25, 13:42	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	01.10.10	42002918	Dr. Deutsch	23.05.25, 10:37	23.05.25, 10:37	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	12.04.89	42003389	Dr. Deutsch	22.05.25, 16:20	22.05.25, 16:20	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	01.10.10	42003499	Dr. Deutsch	21.05.25, 15:16	21.05.25, 15:16	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	01.10.10	42003498	Dr. Deutsch	21.05.25, 15:14	21.05.25, 15:14	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	01.10.10	42003495	Dr. Deutsch	21.05.25, 12:00	21.05.25, 11:00	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	01.10.10	42003494	Dr. Deutsch	21.05.25, 14:48	21.05.25, 10:00	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted] (ch, 30 Jc)	01.09.94	42000729	Dr. Deutsch	07.05.25, 14:15	07.05.25, 14:15	ZUM AUFTRAG
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	01.09.04	42003044	Dr. Deutsch	30.04.25, 10:00	30.04.25, 10:00	ZUM AUFTRAG



1. Laborbefund prüfen und Resultate als Liste anschauen
2. Symbol «Anhänge» auswählen
3. Laborbefund als PDF-Dokument auswählen (*Laborbefund als PDF-Dokument wird heruntergeladen und kann geöffnet werden*)

SWISSAnalysis Order Intelligence

Obelix Gallier (38 J., männlich) Labor Klinische Informationen

Endbefund 42000030 Abnahme 19.09.24, 13:23 Befund 19.09.24, 13:23

Alle Final Pathologisch Parameter suchen... Einzel Kumulativ

	Einheit	Referenz	Wert	Vorwert	Interpretation
SONSTIGE					
Calcium im Serum	mmol/L	2,15 - 2,5	2,6	2,4	

42000030_2024-09-19.pdf




5 Passwort zurücksetzen

Sollten Sie als Kunde Ihre Zugangsdaten zum SwissAnalysis Portal vergessen, können Sie das Passwort einfach zurücksetzen. Dazu benötigen Sie lediglich den Zugang zum E-Mail-Posteingang des für Sie erstellten Kontos.

Öffnen Sie das SwissAnalysis Portal in Ihrem Internetbrowser:

<https://oe.swissanalysis.ch/de/>

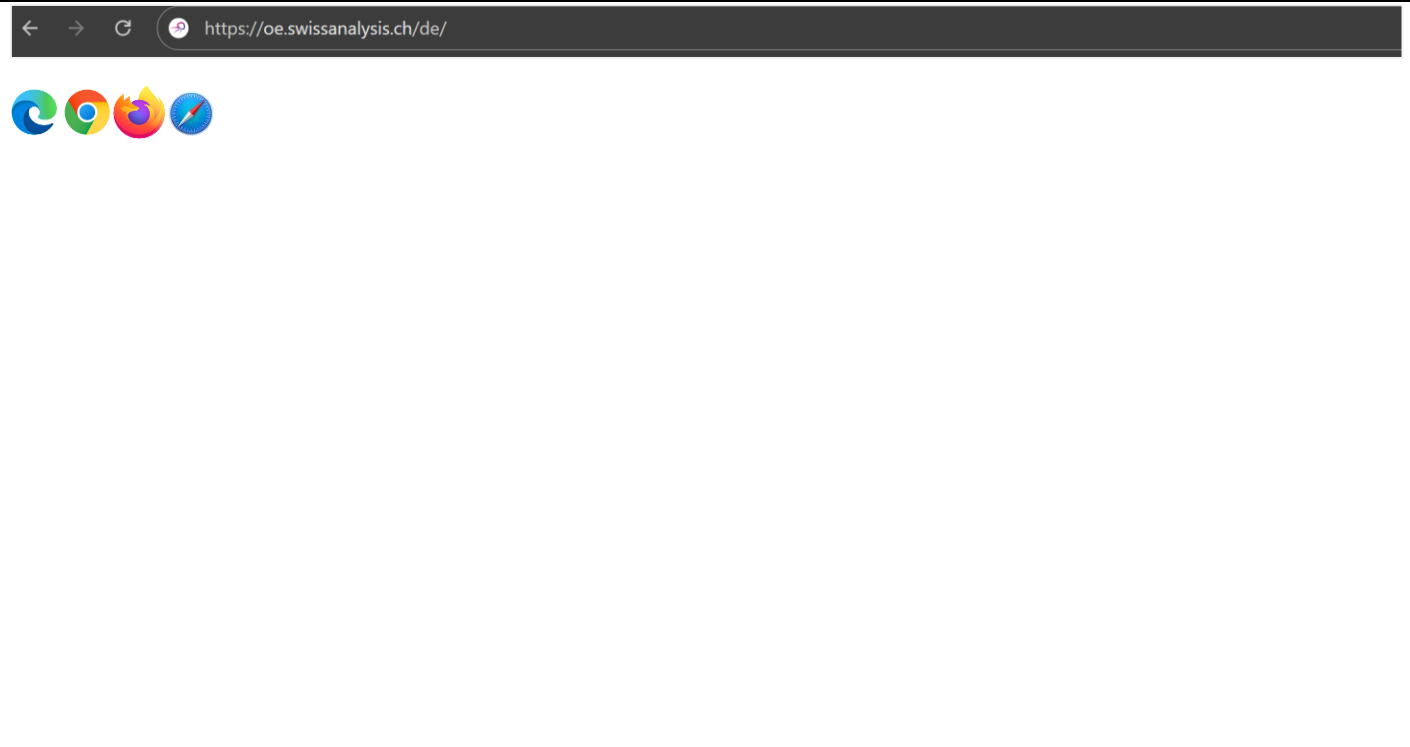




1. Wählen Sie «Forgot Password?» aus
2. Geben Sie Ihre Kunden-E-Mail-Adresse ein
3. Wählen Sie die Schaltfläche «SEND» aus


i Daraufhin werden Sie ein E-Mail erhalten, in welchem Sie aufgefordert werden ein neues Passwort zu setzen. Diese Meldung wird angezeigt:

The image displays a three-step process for password recovery on the SWISSAnalysis website. Step 1: The 'Log in' page features a 'Forgot Password?' link highlighted with a blue circle and the number 1. Step 2: The 'Forgot your password?' page shows an email address 'kunde@email.com' entered in the 'Email address*' field, with the 'SEND' button highlighted by a blue circle and the number 3. Step 3: The 'Check your email inbox' page displays a red envelope icon and instructions to check the spam folder if no email is received, with a 'Back to Login' link at the bottom. Blue arrows connect the steps in sequence.



1. Link im E-Mail auswählen
2. Ein sicheres neues Passwort zwei Mal eingeben
3. Die Schaltfläche «SEND» auswählen

 *Nun können Sie sich mit Ihren neuen Zugangsdaten, bestehend aus E-Mail-Adresse und neuem Passwort, einloggen.*

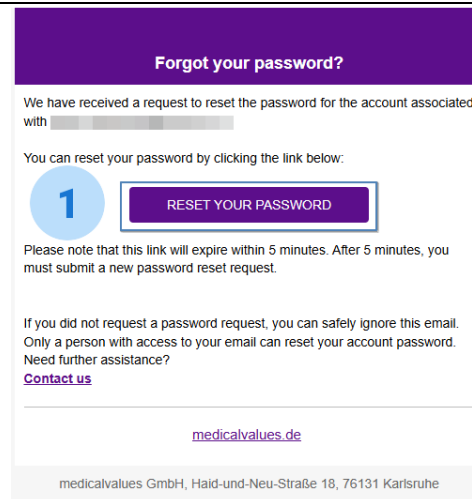

Forgot your password?

We have received a request to reset the password for the account associated with [redacted]

You can reset your password by clicking the link below:


1 [RESET YOUR PASSWORD](#)

Please note that this link will expire within 5 minutes. After 5 minutes, you must submit a new password reset request.

If you did not request a password request, you can safely ignore this email. Only a person with access to your email can reset your account password. Need further assistance? [Contact us](#)


medicalvalues.de


medicalvalues GmbH, Haid-und-Neu-Straße 18, 76131 Karlsruhe

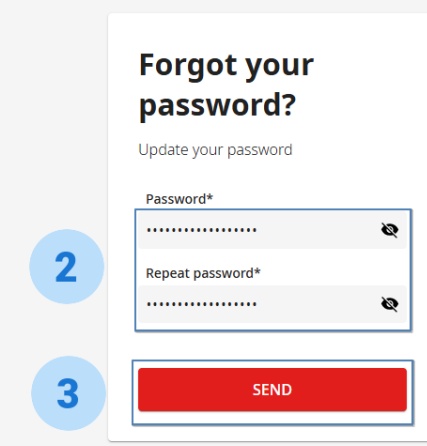

Forgot your password?

Update your password

Password*
..... 

Repeat password*
..... 

3 [SEND](#)