

PATIENTENANLEITUNG

Nachweis SARS-CoV-2 (PCR) – Rachenspülung


Inhalt des Testkits:

- ✓ 1 Probengefäss
- ✓ 1 Trichter (Spuckhilfe)
- ✓ 1 Schraubdeckel
- ✓ 1 Rachenspüllösung (5ml) aus reiner physiologischer Kochsalzlösung, daher ungefährlich
- ✓ 1 SafetyBag
- ✓ 1 Rücksendekuvert
- ✓ 1 Auftragsformular (optional)

So wird's gemacht:

Durchführung:

- 1.) Vor der Probenentnahme für mindestens 45 Minuten nichts essen, nichts trinken und nicht rauchen.
- 2.) Drehen Sie den Trichter auf das Probengefäss.
- 3.) Nun drehen Sie den Deckel der Kochsalzlösung ab und leeren Sie die Flüssigkeit in den Mund.
- 4.) Verteilen Sie diese gut in der Mundhöhle und gurgeln Sie die Lösung für ca. 30 Sekunden, tief im Rachenraum.
- 5.) Anschliessend spucken Sie die Flüssigkeit sorgfältig in das Probengefäss durch den Trichter.

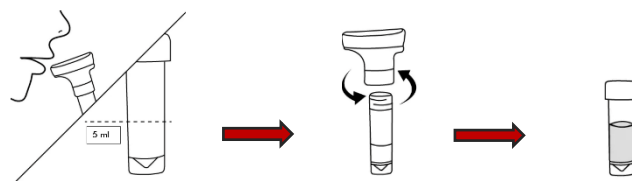

- 6.) Nun schrauben Sie den Trichter ab und werfen Sie diesen, das Probenröhrchen wird mit dem Schraubdeckel gut verschlossen.
Beschriften Sie es mit Ihrem Namen und Geburtsdatum.
- 7.) Nun legen Sie das Probengefäss in das beiliegende SafetyBag und verschliessen Sie es.
- 8.) SafetyBag (mit Probengefäss) und den komplett ausgefüllten, unterschriebenen Auftragsbogen in das weisse Rücksendekuvert legen, welches auch verschlossen wird.
- 9.) Senden Sie die Probe an uns zurück bzw. werfen Sie es bei uns im Labor direkt ein (Briefeinwurf: Hauptstasse 137 D, 8274 Tägerwilen)
Das Analyseergebnis wird von uns an das BAG gemeldet, im Fall eines POSITIVEN Resultates auch an den Kantonsarzt!

ACHTUNG: Nicht beschriftete Proben werden vernichtet!

Haben Sie noch Fragen? – Wir helfen Ihnen gerne weiter! – IHR LABORTEAM